

MASEUR ÎNCĂLZIT SHIATSU

Model: HT-505

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă client, vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați arătat-o achiziționând acest produs. Citește cu atenție aceste instrucțiuni pentru utilizare și păstrează-le pentru referințe viitoare.

Utilizare intenționată:

Masaj la gât, umeri, spate, dar și alte părți ale corpului precum coapsele, tibiile, picioarele, brațele...

Parametri tehnici:

Sursa de alimentare: AC 230 V / DC 12 V / 2A adaptor de rețea sau dintr-o priză auto de 12 V Consum maxim de energie. 24W Greutate: 2,8 kg Lungime: 110 cm Temporizator automat: aproximativ 15 minute

- Acest aparat poate fi folosit doar de copii cu vârsta de 8 ani, persoane cu mobilitate redusă, capacități senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă este prezentă o persoană desemnată care supraveghează utilizarea corectă și sigură a produsului și este conștientă de riscurile implicate în utilizarea acestuia.
- Copiii nu trebuie să se joace sau să manipuleze aparatul în niciun fel fără supravegherea unei persoane autorizate.
- Dacă aveți probleme de sănătate, consultați întotdeauna medicul despre utilizarea acestui dispozitiv.
- Folosirea aparatului în mod repetat, cu o pauză de o oră
- Femeile însărcinate nu trebuie să folosească dispozitivul.
- Nu folosiți aparatul dacă sunteți bolnav. Dacă suferi de boli cardiace și vasculare sau orice altă afecțiune, consultați medicul despre utilizarea dispozitivului.
- Dacă simțiți orice disconfort în timpul utilizării dispozitivului, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Deconectează adaptorul de la rețeaua electrică atunci când aparatul nu este folosit.
- Nu demontați, nu reparați sau modificați singur aparatul. Trimiteți toate reparațiile doar către un centru de service specializat.
- Nu folosiți aparatul dacă mâinile sunt umede sau ude.
- Nu folosiți aparatul dacă cablurile de alimentare, adaptorul sau aparatul sunt deteriorate în vreun fel.
- Nu folosiți aparatul într-o cameră unde temperatura sau umiditatea sunt ridicate. - Nu folosiți pliat, nu folosiți mototolit.
- Nu băgați pini în curea.
- Nu folosiți aparatul când este ud.

FUNCȚIA PRODUS (CONTROL)

Panoul de butoane

A - on/off

B - pentru a schimba funcționarea capetelor de masaj

C - intensitatea masajului

D - butonul de încălzire on/off

Caracteristici:

- Controlul pe microcalculator
- Două capete de masaj, fiecare cu patru proeminente
- Posibilitatea de a schimba funcționarea capetelor de masaj
- Posibilitatea de a schimba intensitatea masajului



EVALUAREA DAUNELOR

Dacă există o problemă cu funcționarea produsului, verifică următoarele puncte pentru a te ajuta să rezolvi defectul. Dacă produsul tot nu funcționează, oprește-l și deconectează-l. Apoi contactează departamentul de service.

Nu demonta niciodată produsul acasă și nici nu încerca să-l reperi singur. Dacă faci acest lucru, vei pierde dreptul la perioada de garanție, iar vânzătorul nu va fi răspunzător pentru eventualele probleme care vor apărea.

DEPANARE





Dificultăți	Posibile soluții/măsuri
Produsul nu pornește după pornire.	Verifică dacă adaptorul este conectat corect la priză. Verifică dacă soclul tău funcționează. Verifică dacă conectorul dispozitivului este conectat corect la adaptor sau la conectorul adaptorului de mașină. Asigură-te că butonul de masaj este apăsat corect.
Produsul se oprește în mijlocul masajului.	Verifică dacă cablul de alimentare nu este deconectat de la conectorul adaptorului sau dacă adaptorul nu este deconectat de la priză. Verifică dacă butonul de pornire de pe panoul de control nu a fost apăsat din greșeală. Funcția automată de cronometrare de masaj de 15 minute este posibil să fi avut deja loc. Funcția de protecție la supraîncălzire a aparatului ar fi putut fi activată. Oprește alimentarea principală și lasă aparatul să se răcească. Dacă problema persistă, încetează să folosești produsul și contactează departamentul de service.

METODĂ SUGERATĂ DE A FOLOSI
GĂTUL/UMERII PARTEA SUPERIOARĂ
A SPATELUI

PARTEA INFERIOARĂ A SPADEI

FESELE

COAPSE

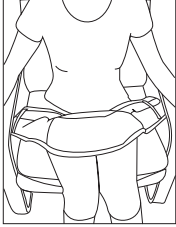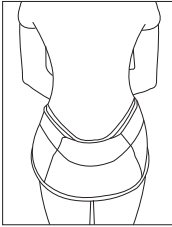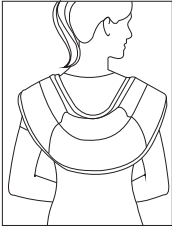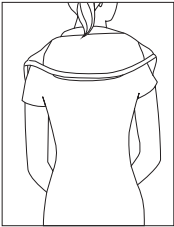

UTILIZARE
OPERAȚIONALĂ:

Conectează priza de alimentare a adaptorului AC la o priză de perete (sau poți folosi un adaptor de priză auto de 12V) și pornește butonul de pornire ON/OFF. Mută unitatea de masaj în zona de masaj și asigură-te că dispozitivul este așezat corespunzător și confortabil pe corpul tău.

Caracteristici

Apasă butonul de pornire și aparatul se va porni și va începe să funcționeze. În timpul masajului, poți activa schimbarea mersului (vezi "CONTROL")

Notă!
Funcția de oprire automată este activată după aproximativ 15 minute.

Anunțuri importante

- Nu folosiți produsul dacă materialul de acoperire este deteriorat.
- Dacă furnizați produsul printr-o priză auto, tensiunea permisă este de 12 V. Când este folosit în mașini cu 24 V, există riscul de deteriorare a produsului, care nu este acoperit de garanție.
- Nu introduceți niciun obiect sau material inflamabil în produs. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit, deteriorarea produsului sau poate crea un risc de incendiu.
- Nu este necesar să aplicați o presiune prea mare în timpul masajului
- Nu acoperiți produsul cu nimic în timpul masajului. Acest lucru ar putea face ca motorul să se încălzească mai mult și să provoace daune, sau chiar să provoace un incendiu.
- Produsul poate face zgomot în timpul masajului.
- Dacă simțiți orice disconfort, opriți imediat masajul.
- Acest produs nu este destinat tratamentului medical.
- Dacă aveți probleme de sănătate, vă recomandăm să consultați mai întâi medicul despre utilizarea acestui produs. Nu folosiți produsul dacă te simți rău. Produsul nu ar trebui, de asemenea, să fie folosit de femeile însărcinate.

NOTIFICARE DE SIGURANȚĂ

Utilizatorii trebuie să fie bine familiarizați cu instrucțiunile de utilizare. Pentru siguranța copiilor dumneavoastră, citiți toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual

Protecția mediului

Informații despre eliminarea echipamentelor electrice și electronice Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile casnice la sfârșitul duratei sale de viață utilă sau într-un moment în care reparația ar fi neeconomică. Pentru a elimina corect produsul, predați-l punctelor de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. Prin eliminarea corectă a acestora, vei ajuta la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi consecințele eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni dacă acest tip de deșeurii este eliminat incorect, în conformitate cu reglementările naționale. Nu aruncați bateriile în deșeurile generale, ci duceți-le la centrele de reciclare a bateriilor.

Serviciu

În cazul în care găsiți vreun defect după achiziționarea produsului, vă rugăm să contactați departamentul de service. Când folosești produsul, urmează instrucțiunile din manualul de instrucțiuni atașat. Reclamațiile nu vor fi luate în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați urmat instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.

Garanția nu este acoperită

- Uzura naturală a părților funcționale ale produsului ca urmare a utilizării sale
- pentru intervenții de service legate de întreținerea standard a produsului (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse uzurii normale ...)
- Defecte cauzate de influențe externe (de exemplu, condiții climatice, praf, utilizare inadecvată etc.)
- daune mecanice cauzate de căderea produsului, impact, impact asupra acestuia etc.
- daune cauzate de manipulare necorespunzătoare, suprasolicitare, utilizarea pieselor incorecte, accesorii sau unelte nepotrivite etc.

În cazul produselor revendicate care nu au fost protejate corespunzător împotriva daunelor mecanice în timpul transportului, riscul de posibilă deteriorare aparține exclusiv proprietarului. **Furnizorul își rezervă dreptul de a face orice modificări ale instrucțiunilor de utilizare și nu este răspunzător pentru posibile erori de tipărire. Ilustrația și descrierea pot diferi de realitate în funcție de model.**